

Made in Germany

fläsh.

Tandblegning
tandlæger stoler på
og patienter elsker.

flaeshapp.com



fläsh.

Tandblegning



Gør patienterne til fans af din klinik!

Tandblegning kan være nøglen til det perfekte smil, som patienterne ønsker – det kan være et lysere smil eller den afsluttende finish i forbindelse med restaurerings- eller tandreguleringsbehandlinger.

fläsh er det professionelle tandblegningssystem, der leverer pålidelige resultater, er nemt at bruge for hele tandlægeteamet, forenkler arbejdsgangene og sikrer, at hver patient får en tryk og komfortabel behandling.

Med fläsh behøver tandlægeklinikkerne ikke længere at bekymre sig om resultater og kan i stedet fokusere på at give patienterne et smil, der forandrer deres liv og øger selvtilliden.

Med fläsh er du eksperten, der giver patienterne et hvidere smil – fordi din succes er vores mission.

Tilfredse patienter, hver gang

Pålidelige resultater, der øger patienternes tillid og loyalitet.

Let og enkelt for det kliniske team

Brugervenligt system, der er udviklet til at forenkle arbejdsgange.

30 års ekspertise

Anerkendt tysk innovation, der sikrer tryghed og ensartede resultater.

fläsh.

Whitening Lamp



+



Perfekt synergi – hemmeligheden bag enestående blegningsresultater!


Hemmeligheden bag de gode resultater er den perfekte kombination af fläsh Whitening Lamp og fläsh Light Whitening Gel.

Den nyeste højtydende LED-teknologi med et højintensivt, fokuseret lysspektrum og synligt blå lys. Ergonomisk betjening takket være Easy Lock-systemet, der giver mulighed for perfekt positionering foran patienten. Særlige indstillinger til følsomme tænder og blegning af enkelte tænder. Lysstyrken kan varieres. Opnå optimale resultater med fläsh Chairside Light Whitening Gel. Sikker driftstemperatur.

fläshcard
Tidsstyringssystem



Virtuelle anvisninger integreret direkte i udstyret

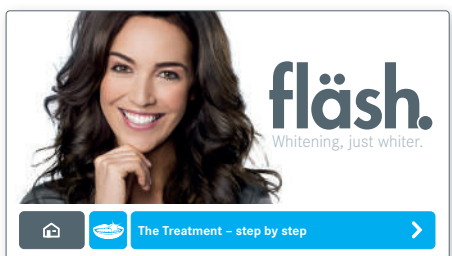

3 blegningsprogrammer
Konstant/Puls/Enkelt



Bestemmelse af de opnåede blegningsnuancer



Avanceret teknologi
3 højtydende LED'er.
Højintensivt blå
lysspektrum
(460 nm, 190 mW/cm²)

Lang levetid
LED'erne kan anvendes
mere end 10.000 gange

Ergonomisk design
Easy Lock-system
givernøjagtig
patientpositionering

**Brugerdefinerbare
indstillinger**
Indstillinger til følsomme
tænder og blegning af
enkelte tænder

Variabel lysstyrke
Justerbar for at sikre
optimale resultater


Sikker temperatur
Sikrer patientens komfort

Optimal kombination
De bedste resultater
opnås med fläsh Chairside
Light Whitening Gel

Systemet omfatter
Whitening Lamp,
3 sikkerhedsbriller,
fläshcard-system til gel,
touchscreen i fuld farve

fläsh.

Chairside Light
Whitening System

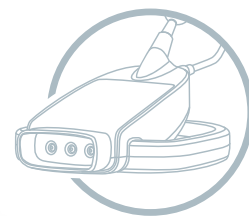


Skånsom, effektiv og hurtig

fläsh Chairside Light Whitening med aktiv klorofyl er skånsom mod tænderne og har en lav risiko for sensitivitet. Effektiv blegning efter 3-4 behandlinger à 15 minutters varighed.

Kosmetisk tandblegning med 6 % hydrogenperoxid. Medicinsk tandblegning med 32 % hydrogenperoxid (kun, hvis det er medicinsk indiceret).

Behandlingen kan intensiveres ved efterfølgende brug af fläsh Take Home Whitening.

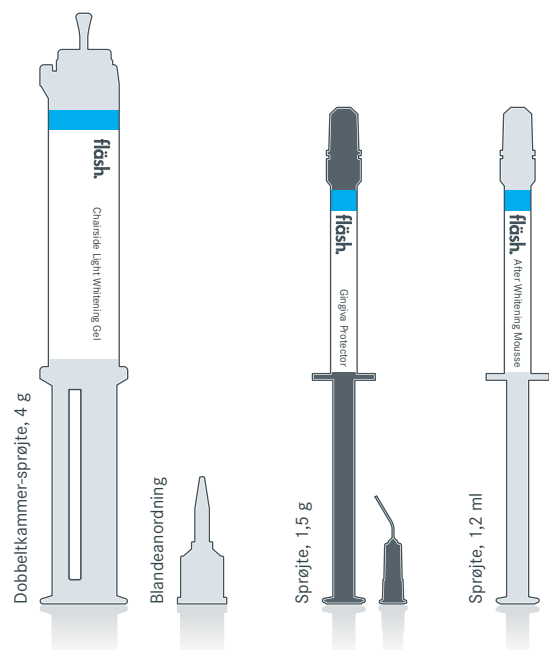

Dobbeltkammer-sprøjte, 4 g

Blandeordning

Sprøjte, 1,5 g

Sprøjte, 1,2 ml



fläsh
Læbeholder



www.wtccsa.com/flaesh.com/video_step_by_step_eng

Video: Behandlingen
trin for trin

Indholdet af et sæt til
2 patienter*:

- 2 x Chairside
Whitening Gel, 4 g
- 2 x Gingiva Protector, 1,5 g
- 2 x After Whitening
Mousse, 1,2 ml
- 2 x Læbeholder
- 1 x 120 minutters tidskort

Effektiv blegning

Opnår resultater efter
3-4 behandlinger à
15 minutters varighed

Optimeret til fläsh Whitening Lamp

Leverer hvidere resultater

Præcis påføring

Grøn gel sikrer nøjagtighed

Egnet til voksne

Til patienter i alderen
18 år og derover


Tilgængelige koncentrationer

Medicinsk tandblegning
32 % HP
Kosmetisk tandblegning
6 % HP

* Indholdet af sætterne
kan variere fra land til land


fläsh.

Take Home
Whitening System

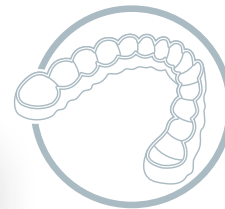

Med laboratoriefremstillede, tilpassede skinner

Kan anvendes som enkeltstående behandling eller som opfølgning. Til brug i blegeskiner. Fuldender tandblegningsbehandlingen i klinikken. Skånsom tandblegning med mintsmag.

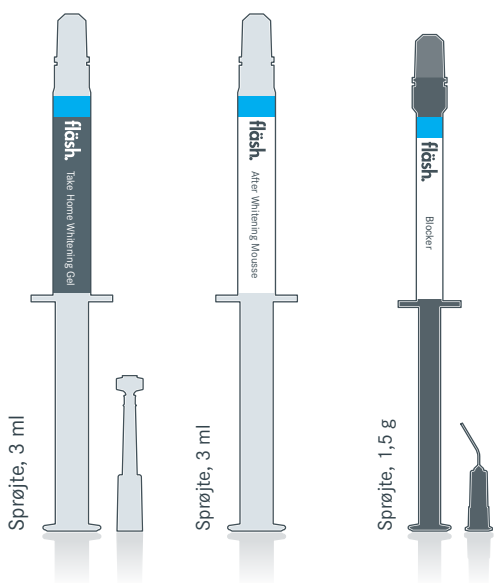

Indholdet af et sæt
til 1 patient*:

4 x Whitening Gel, 3 ml
1 x After Whitening
Mousse, 3 ml
2 x Blegefolie*
1 x Blocker*
1 x Skinneæske

Blocker (valgfrit)
Afstandsstykke til
laboriemodeller

Skinneæske
Beskytter de
specialfremstillede skinner
og holder dem rene

Effektiv gel
Leveres i 3 ml-sprøjter
for nem påføring

Egnet til voksne
Til patienter i alderen
18 år og derover

After Whitening Mousse
Desensibiliserer og
remineraliserer tænderne

Kosmetisk tandblegning
10 % CP (≈3,5 % HP)
16 % CP (≈5,6 % HP)

Blegefolie (valgfrit)
Anvendes til at opnå
perfekt pasform af
laboratoriefremstillede
og tilpassede skinner

* Indholdet af sætterne
kan variere fra land til land

HP: hydrogenperoxid,
CP: carbamidperoxid

fläsh.

Efterbehandling

Den bedste behandling til dine patienter efter tandblegning

Den ideelle pleje til hvide tænder før og efter tandblegningsbehandlinger. Beregnet til daglig brug. Selv til følsomme tænder. Styrker emaljen med 17 % hydroxylapatit. Dobbelt kariesbeskyttelse med natriumfluorid (1100 ppm F⁻) og 30 % xylitol. Understøtter spytdannelse, som igen styrker remineralisering.

Uden SLS. Uden triclosan. Uden blegemidler. Skånsomme rensmidler. Nyt: Uden titandioxid. Beskytter mod nydannelse af tandsten.



Forfriskende LIME-MINT

Whitening
Toothpaste
Care & Repair



flaeshapp.com

Tip: Brug fläsh-appen til at vise blegningsresultatet!



Problemfri integration i din klinik

Tandblegning er en vigtig del af moderne, æstetisk tandpleje. Overvej disse vigtige trin for at opnå en vellykket integration i din praksis:

Sæt fokus på dit team

fläsh Whitening Lamp er udstyret med en integreret behandlingsvejledning, som gør det nemt at følge proceduren. Der er desuden en trin-for-trin-instruktionsvideo tilgængelig på flaesh.com. At gå foran med et godt eksempel er effektivt – når dine teammedlemmer selv oplever tandblegning, bliver de entusiastiske fortalere for dette tilbud på din klinik.

Øg patienternes kendskab

De fleste patienter opsøger ikke en klinik specifikt for at få en tandblegning – dog vil de ofte gerne have et flottere smil! Dit tandlægeteam kan uden besvær introducere tandblegning som en supplerende behandling. Fremhæv denne mulighed under konsultationer og i dit patientinformationsmateriale, som vist på næste side.

Styrk betydningen af dit arbejde

Implantater, tandreguleringsbehandlinger eller -restaureringer, der ser naturlige ud, er endnu mere overbevisende, hvis de kombineres med et strålende, hvidt smil. Anvend før- og efterbilleder til at synliggøre forvandlingen – både i din praksis og på de sociale medier.

Gør tilfredse patienter til loyale ambassadører

Et selvsikkert, hvidere smil spreder glæde. Tilfredse patienter deler deres erfaringer og tiltrækker derved nye klienter ved at fortælle andre om deres oplevelse. Gør tandblegning til en vigtig del af din kliniks succes!


Vejen til det perfekte smil

Tandblegningsbehandlinger giver dine patienter et flottere smil. De skaber desuden yderligere værdi i kombination med tandbehandlinger og kan genoprette patologisk misfarvede tænder til deres naturlige udseende. fläsh-patientinformationsfolderen gør det let at forklare mulighederne for at få et hvidere smil til den enkelte patient.

Digitalt tilgængelig på www.fläsh.com og på fläshapp.com

Uddrag fra patientbrochuren.

Det perfekte supplement til din behandling Tandblegning før tandrestaurering

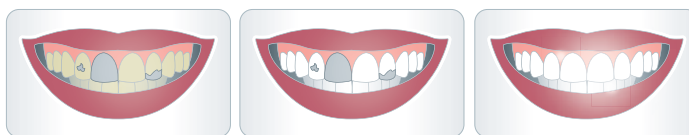

Ved fyldninger, indlæg, kroner og implantater skal du blege de andre tænder på forhånd. Proteser kan ikke farvematches senere.

Tandblegning efter tandregulerende behandling (bøjle)




Tandregulering hos voksne sikrer korrekt tandstilling. fläsh tandblegning giver dit smil den perfekte finish.

Blegning af enkelte tænder



Også velegnet til blegning og tilpasning af enkelte tænder.

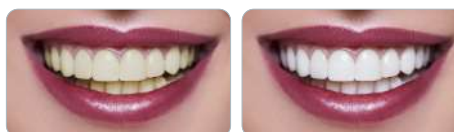

Det er altid muligt at få genopfrisket behandlingen.

fläsh.
Er du klar til at få dit smukkeste smil igen?
Professionel tandblegning lige her i din tandlægeklinik.

fläsh.com

Patientfolder til dit venteværelse

fläsh.

Markedsføring



Scan for at komme i gang!

flaeshapp.com

Vis det, og fortæl patienten om det

Øjeblikkelig AI-drevet forhåndsvisning af de blegningsresultater, der kan opnås.

Kan anvendes af klinikpersonale og patienter.

Det er ikke nødvendigt at installere apps.

Du skal blot åbne **www.flaeshapp.com** i din browser. Brug derefter kameraet på din enhed.

Tip: Tilføj **flaeshapp.com** til din telefons startskærm for at få hurtig adgang og vise patienterne deres bedste smil. Drej telefonen vandret, når du har taget et billede, for at få en før-og-efter-sammenligning.



Markedsføring over for patienterne gør en forskel

Tandblegning er en effektiv måde at tiltrække nye patienter på, supplere andre behandlinger og skabe vækst for din praksis.



Akryldisplay med moderne kunst til væg, 60 x 60 cm



Professionelt akryldisplay til væg, 60 x 60 cm



21 x 15 cm, akryldisplay i høj kvalitet med skiftende motiver til din skranke eller dit venteværelse.

Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere support til markedsføring.

fläsh Whitening Lamp

1 x Whitening Lamp / 3 sikkerhedsbriller / 1 reklameplade i akryl, 60 x 60 cm

fläsh Chairside Light Whitening System 32 % HP

Sæt til 2 patienter: 2 x gel, 32 % HP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g, 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x Læbeholder + 120 minutters tidskort

32 % HP: medicinsk tandblegning – kun hvis det er medicinsk indiceret

fläsh Chairside Light Whitening System 6 % HP

Sæt til 2 patienter: 2 x gel, 6 % HP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g, 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x Læbeholder + 120 minutters tidskort

6 % HP: kosmetisk tandblegning

fläsh Take Home Whitening System 10 % CP (≈3,5 % HP)

Sæt til 1 patient: 4 x gel, 10 % CP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x skinneæske, (valgfrit: 2 x blegefolie / 1 x Blocker), kosmetisk tandbehandling

fläsh Take Home Whitening System 16 % CP (≈5,6 % HP)

Sæt til 1 patient: 4 x gel, 16 % CP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x skinneæske, (valgfrit: 2 x blegefolie / 1 x Blocker), kosmetisk tandbehandling

fläsh Whitening Pen

4 ml, 16 % CP (≈5,6 % HP), mintsmaag, kosmetisk tandblegning

fläsh Whitening Toothpaste, Lime-Mint

75 ml, 30 % xylitol, 17 % hydroxylapatit

HP: hydrogenperoxid, CP: carbamidperoxid

Made in Germany

fläsh.

Vælg vores produkter for at få en enestående tandblegnings- og plejeoplevelse, der forskønner dine patienters smil og styrker din kliniks exceptionelle omdømme.



Find din lokale forhandler.

WHITEsmile GmbH
Weinheimer Straße 6
69488 Birkenau/Tyskland
+49 (0)6201 8432 190
info@flaesh.com

flaesh.com

Alle blegeprodukterne er beregnet til professionel brug og må kun anvendes eller udleveres af tandlæger.
Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl i teksten.
Udvalget af produkter kan variere fra land til land. Spørg din lokale forhandler.
REF 906A4, 03/2025, DANISH