

Made in Germany

fläsh.

Λεύκανση δοντιών
που εμπιστεύονται οι οδοντίατροι
και λατρεύουν οι ασθενείς.

flaeshapp.com



fläsh.

Λεύκανση δοντιών



Κάντε τους ασθενείς να λατρέψουν το ιατρείο σας!

Η λεύκανση των δοντιών μπορεί να είναι το κλειδί για το τέλειο χαμόγελο που επιθυμούν οι ασθενείς — για ένα λαμπερό χαμόγελο ή για την τελική πινελιά της αποκατάστασης ή της ορθοδοντικής τους θεραπείας.

Το fläsh είναι το επαγγελματικό σύστημα λεύκανσης δοντιών, το οποίο παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, είναι εύκολο στη χρήση για όλη την οδοντιατρική ομάδα, απλοποιεί τη ροή εργασίας και διασφαλίζει ότι κάθε ασθενής γίνεται αποδέκτης μιας ασφαλούς και άνετης θεραπείας.

Με το fläsh, τα οδοντιατρεία μπορούν να σταματήσουν να ανησυχούν για τα αποτελέσματα και να επικεντρωθούν στη δημιουργία χαμόγελων γεμάτων αυτοπεποίθησης που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών τους.

Με το fläsh, είστε ο ειδικός που προσφέρει πιο λαμπερά χαμόγελα που λατρεύουν οι ασθενείς — επειδή η επιτυχία σας είναι η αποστολή μας.

Χαρούμενοι ασθενείς, κάθε φορά

Αξιόπιστα αποτελέσματα που ενισχύουν την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των ασθενών.

Ευκολία εφαρμογής για την κλινική ομάδα

Ένα εύκολο στη χρήση σύστημα που έχει σχεδιαστεί για την απλούστευση της ροής εργασίας.

30 έτη τεχνογνωσίας

Αξιόπιστη γερμανική καινοτομία που διασφαλίζει την ασφάλεια και τη συνέπεια.

flaesh.com

fläsh.

Whitening Lamp



Τέλεια συνέργεια — το μυστικό για εξαιρετικά αποτελέσματα λεύκανσης!


Το μυστικό για εξαιρετικά αποτελέσματα βρίσκεται στον τέλειο συνδυασμό του fläsh Whitening Lamp και του fläsh Light Whitening Gel.

Η τελευταία τεχνολογία LED υψηλής απόδοσης με φάσμα εστιασμένου φωτός υψηλής έντασης με ορατό μπλε φως. Η εργονομική λειτουργία που οφείλεται στο σύστημα Easy Lock επιτρέπει την τέλεια τοποθέτηση μπροστά από τον ασθενή. Ειδικές ρυθμίσεις για ευαίσθητα δόντια και λεύκανση ενός δοντιού. Η έξοδος φωτός μπορεί να ποικίλει. Βέλτιστα αποτελέσματα με το fläsh Chairside Light Whitening Gel. Ασφαλής θερμοκρασία λειτουργίας.


Σύστημα διαχείρισης χρόνου
fläshcard



Εικονικές οδηγίες απευθείας
στη συσκευή

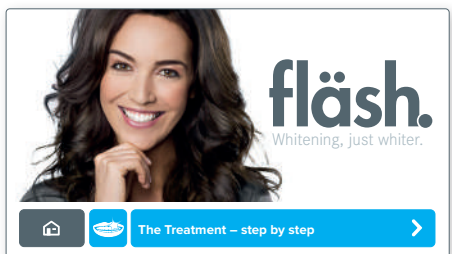

3 προγράμματα λεύκανσης
Σταθερό / Παλμικό / Μονό

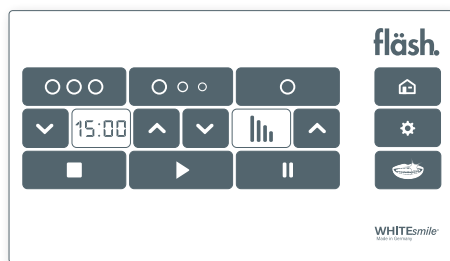

Επιτυχής προσδιορισμός
αποχρώσεων λεύκανσης



Προηγμένη τεχνολογία
3 λαμπτήρες LED
υψηλής απόδοσης.
Φάσμα μπλε φωτός
υψηλής έντασης
(460 nm, 190 mW/cm²)

Μεγάλη διάρκεια ζωής
Λαμπτήρες LED
που διαρκούν για
περισσότερες από
10.000 εφαρμογές

Εργονομικός σχεδιασμός
Σύστημα Easy Lock για
τοποθέτηση ακριβείας
στον ασθενή

**Προσαρμόσιμες
ρυθμίσεις**
Λειτουργίες για
ευαίσθητα δόντια και
λεύκανση ενός δοντιού

**Μεταβλητή έξοδος
φωτός**
Ρυθμιζόμενη για
βέλτιστα αποτελέσματα


Ασφαλής θερμοκρασία
Διασφαλίζει την άνεση
του ασθενούς

Άριστη αντιστοιχία
Βέλτιστα αποτελέσματα
με το fläsh Chairside
Light Whitening Gel

**Το σύστημα
περιλαμβάνει**
Whitening Lamp,
3 ζεύγη προστατευτικών
γυαλιών, σύστημα
fläshcard για γέλη,
έγχρωμη οθόνη αφής

fläsh.

Chairside Light
Whitening System

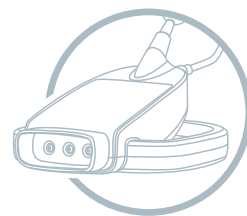


Ήπιο, αποτελεσματικό και γρήγορο

Το fläsh Chairside Light Whitening με ενεργή χλωροφύλλη είναι ήπιο για δόντια με χαμηλό ρυθμό ευαισθησίας. Αποτελεσματική λεύκανση σε 3-4 θεραπείες των 15 λεπτών έκαστη, σε μία συνεδρία.

Αισθητική λεύκανση δοντιών με 6 % υπεροξείδιο του υδρογόνου. Ιατρική λεύκανση δοντιών με 32 % υπεροξείδιο του υδρογόνου και μόνο με ιατρική ένδειξη.

Η θεραπεία μπορεί να εντατικοποιηθεί με την επακόλουθη χρήση του fläsh Take Home Whitening.

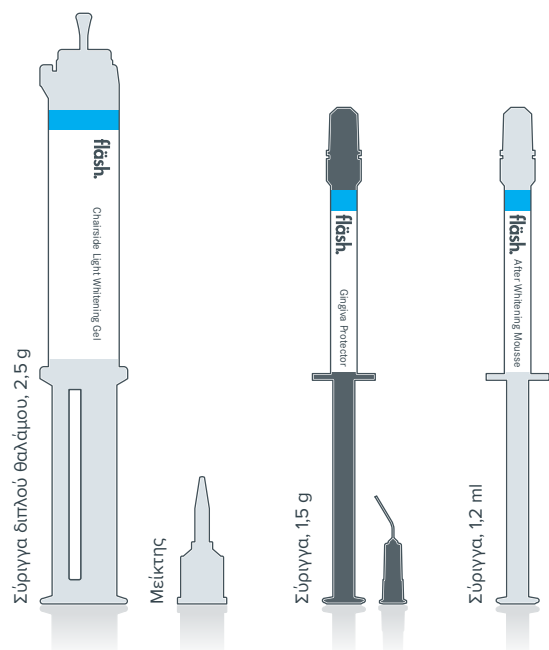

Στοματοδιαστολέας
fläsh



Βίντεο: Η θεραπεία
βήμα προς βήμα

Περιεχόμενα του κιτ
για 2 ασθενείς*:

- 2 x Chairside
Whitening Gel, 4 g
- 2 x Gingiva Protector, 1,5 g
- 2 x After Whitening
Mousse, 1,2 ml
- 2 x Στοματοδιαστολέας
- 1 x Κάρτα χρόνου
- 120 λεπτών

Αποτελεσματική
λεύκανση

Επιτυγχάνει
αποτελέσματα σε
3-4 συνεδρίες των
15 λεπτών έκαστη

Βελτιστοποιημένη για
fläsh Whitening Lamp
Παρέχει το λευκότερο
αποτέλεσμα

Ακριβής εφαρμογή

Η πράσινη γέλη
διασφαλίζει την ακρίβεια

Κατάλληλο για ενήλικες
Για ασθενείς άνω των
18 ετών

Διαθέσιμες
συγκεντρώσεις

Ιατρική λεύκανση
δοντιών 32 % HP
Αισθητική λεύκανση
δοντιών 6 % HP

* Το περιεχόμενο των
κιτ μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τη χώρα


fläsh.

Take Home
Whitening System



Με ειδικά διαμορφωμένους εργαστηριακούς νάρθηκες

Για χρήση ως αυτόνομη θεραπεία ή για επακόλουθη θεραπεία. Για χρήση σε νάρθηκες λεύκανσης. Ολοκληρώνει το πακέτο λεύκανσης που παρέχεται στο ιατρείο. Ήπια λεύκανση με γεύση μέντας.

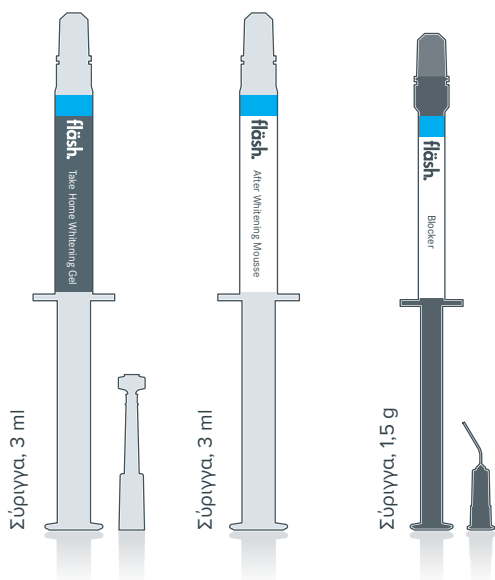

Περιεχόμενα του κιτ για 1 ασθενή*:

4 x Whitening Gel, 3 ml
1 x After Whitening
Mousse, 3 ml
2 x Φύλλο λεύκανσης*
1 x Blocker*
1 x Θήκη νάρθηκα

Blocker (προαιρετικά)
Ως αποστάτης για
εργαστηριακά μοντέλα

Θήκη νάρθηκα

Για την αποθήκευση και
καθαρή φύλαξη των
ειδικά διαμορφωμένων
ναρθήκων

Αποτελεσματική γέλη
Παρέχεται σε σύριγγες
των 3 ml για εύκολη
εφαρμογή

Κατάλληλο για ενήλικες
Για ασθενείς άνω των
18 ετών

After Whitening Mousse
Απευαισθητοποιεί και
επαναμεταλλοποιεί
τα δόντια

**Αισθητική λεύκανση
δοντιών**
10 % CP (≈ 3,5 % HP)
16 % CP (≈ 5,6 % HP)

**Φύλλο λεύκανσης
(προαιρετικά)**
Για τέλεια εφαρμογή
των ειδικά
διαμορφωμένων
εργαστηριακών
ναρθήκων

* Το περιεχόμενο των
κιτ μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τη χώρα
HP: υπεροξειδίο του
υδρογόνου,
CP: υπεροξειδίο του
καρβαμιδίου

fläsh.

Φροντίδα μετά τη λεύκανση Η καλύτερη θεραπεία μετά τη λεύκανση για τους ασθενείς σας

Η ιδανική φροντίδα για λευκά δόντια πριν και μετά από θεραπείες λεύκανσης. Προορίζεται για καθημερινή χρήση. Κατάλληλη ακόμη και για ευαίσθητα δόντια. Ενισχύει το σμάλτο με 17 % υδροξυλαπατίτη. Διπλή προστασία από την τερηδόνα με φθοριούχο νάτριο (1100 ppm F) και 30 % ξυλιτόλη. Υποστηρίζει τη σιελόρροια, η οποία με τη σειρά της ενισχύει την επαναμετάλλωση.

Χωρίς SLS. Χωρίς τρικλοζάνη. Δεν περιέχει
λευκαντικές ουσίες. Ήπια καθαριστικά μέσα.
Νέο: Δεν περιέχει διοξείδιο του τιτανίου.
Προστατεύει από τον επανασηματισμό πέτρας.



Γεύση φρεσκάδας
ΛΑΪΜ - ΜΕΝΤΑΣ

Whitening
Toothpaste
Care & Repair



flaeshapp.com

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το flaeshapp για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα λεύκανσης!



Εύκολη ενσωμάτωση στο ιατρείο σας

Η λεύκανση των δοντιών είναι ένα ουσιαστικό μέρος της σύγχρονης αισθητικής οδοντιατρικής. Για να την ενσωματώσετε με επιτυχία στο ιατρείο σας, ακολουθήστε αυτά τα βασικά βήματα:

Ενισχύστε την ομάδα σας

Το fläsh Whitening Lamp διαθέτει λειτουργία καθοδηγούμενης θεραπείας, καθιστώντας εύκολη την παρακολούθηση της διαδικασίας. Στον ιστότοπο flaesh.com διατίθεται επίσης ένα εκπαιδευτικό βίντεο με οδηγίες βήμα προς βήμα. Δώστε οι ίδιοι το καλό παράδειγμα. Όταν τα ίδια τα μέλη της ομάδας σας βιώσουν την εμπειρία της λεύκανσης, θα μετατραπούν σε ενθουσιώδεις υποστηρικτές της υπηρεσίας που παρέχετε στο ιατρείο σας.

Ενημερώστε τους ασθενείς

Οι περισσότεροι ασθενείς δεν επισκέπτονται το ιατρείο ειδικά για λεύκανση δοντιών, ωστόσο όλοι θα ήθελαν ένα πιο λαμπερό χαμόγελο! Η οδοντιατρική σας ομάδα μπορεί εύκολα να εισαγάγει τη λεύκανση ως συμπληρωματική θεραπεία. Επισημάνετε αυτήν την επιλογή κατά τη διάρκεια των επισκέψεων των ασθενών σας και αναφέρετέ την και στο ενημερωτικό υλικό που προορίζεται για τους ασθενείς σας, όπως φαίνεται στην επόμενη σελίδα.

Προβάλλετε την εργασία σας

Η επίδειξη φυσικών εμφυτευμάτων, ορθοδοντικών θεραπειών ή αποκαταστάσεων είναι ακόμη πιο συναρπαστική όταν συνδυάζεται με ένα λαμπερό, κατάλευκο χαμόγελο. Χρησιμοποιήστε εικόνες πριν και μετά για να δείξετε αυτήν την αλλαγή - τόσο στο ιατρείο σας όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετατρέψτε τους ευχαριστημένους ασθενείς σε ένθερμους υποστηρικτές σας

Ένα γεμάτο αυτοπεποίθηση, λευκότερο χαμόγελο σκορπά χαρά. Οι ικανοποιημένοι ασθενείς μοιράζονται τις εμπειρίες τους, φέρνοντας νέους πελάτες μέσω συστάσεων από στόμα σε στόμα. Κάντε τη λεύκανση των δοντιών βασικό μέρος της επιτυχίας του ιατρείου σας!

fläsh.

Πληροφορίες για τον ασθενή

Προορισμός: το τέλειο χαμόγελο

Οι θεραπείες λεύκανσης δοντιών χαρίζουν στους ασθενείς σας πιο όμορφα χαμόγελα. Προσδίδουν επίσης μια πρόσθετη αξία στις οδοντιατρικές θεραπείες ή μπορούν να αποκαταστήσουν τα παθολογικά αποχρωματισμένα δόντια στη φυσική τους κατάσταση. Με το ενημερωτικό φυλλάδιο ασθενών fläsh μπορείτε εύκολα να εξηγήσετε σε κάθε ασθενή ξεχωριστά τις δυνατότητες για ένα πιο λευκό χαμόγελο.

Διατίθεται ψηφιακά στον ιστότοπο www.flaesh.com καθώς και στον ιστότοπο flaeshapp.com

Απόσπασμα από το ενημερωτικό φυλλάδιο για τους ασθενείς.

Συνδυάζεται ιδανικά με τη θεραπεία σας Λεύκανση δοντιών πριν από οδοντική αποκατάσταση



Για σφραγίσματα, ένθετα, στεφάνες και εμφυτεύματα, λευκάνετε τα υπόλοιπα δόντια εκ των προτέρων. Η χρωματική αντιστοίχιση της οδοντοστοιχίας δεν είναι δυνατή αργότερα.

Λεύκανση δοντιών μετά από ορθοδοντική θεραπεία (νάρθηκας)




Η ορθοδοντική θεραπεία για ενήλικες εξασφαλίζει τη σωστή ευθυγράμμιση των δοντιών. Το σύστημα λεύκανσης δοντιών fläsh προσθέτει την ιδανική τελική πινελιά στο χαμόγελό σας.

Λεύκανση μεμονωμένων δοντιών



Ενδείκνυται επίσης για τη λεύκανση και την προσαρμογή μεμονωμένων δοντιών.

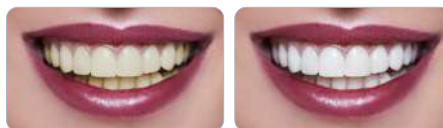

Η επαναληπτική θεραπεία είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή.

fläsh.

Έτοιμοι για το
πιο λαμπερό
σας χαμόγελο;

Επαγγελματική
λεύκανση δοντιών
στο οδοντιατρείο
σας.

flaesh.com



Φυλλάδιο ασθενούς για τον χώρο
αναμονής σας

fläsh.

Μάρκετινγκ



Σαρώστε για να ξεκινήσετε!

flaeshapp.com

Δείξτε και ενημερώστε τον ασθενή σας

Άμεση προεπισκόπηση των επιτεύξιμων αποτελεσμάτων λεύκανσης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ομάδα του ιατρού και τους ασθενείς. Δεν απαιτείται εγκατάσταση εφαρμογής.

Απλώς μεταβείτε στον ιστότοπο **www.flaeshapp.com** στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την κάμερα στη συσκευή σας.

Συμβουλή: Προσθέστε τον ιστότοπο **flaeshapp.com** στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας για γρήγορη πρόσβαση και για να δείξετε στους ασθενείς το καλύτερο χαμόγελό τους. Αφού τραβήξετε μια φωτογραφία, περιστρέψτε το τηλέφωνό σας οριζόντια για σύγκριση πριν και μετά.



Το μάρκετινγκ σε ασθενείς μετράει

Η λεύκανση δοντιών είναι ένας ισχυρός τρόπος για να προσελκύσετε νέους ασθενείς, να βελτιώσετε άλλες θεραπείες και να αναπτύξετε το ιατρείο σας.



Ακρυλική κρεμάστρα τοίχου με μοτίβο μοντέρνας τέχνης, 60 x 60 cm



Ακρυλική κρεμάστρα τοίχου με επαγγελματικό μοτίβο, 60 x 60 cm



21 x 15 cm, ακρυλική βάση υψηλής ποιότητας με μεταβαλλόμενα μοτίβα για τον πάγκο ή την αίθουσα αναμονής σας.

Μη διστάσετε να ζητήσετε πρόσθετο υλικό μάρκετινγκ.

fläsh Whitening Lamp

1 x Whitening Lamp / 3 ζεύγη προστατευτικών γυαλιών / 1 ακρυλικός διαφημιστικός πίνακας, 60 x 60 cm

fläsh Chairside Light Whitening System 32 % HP

Κιτ για 2 ασθενείς: 2 x Γέλη, 32 % HP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g, 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x Στοματοδιαστολέας + Κάρτα χρόνου 120 λεπτών
32 % HP: Ιατρική λεύκανση δοντιών με ιατρική ένδειξη

fläsh Chairside Light Whitening System 6 % HP

Κιτ για 2 ασθενείς: 2 x Γέλη, 6 % HP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g, 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x Στοματοδιαστολέας + Κάρτα χρόνου 120 λεπτών
6 % HP: Αισθητική λεύκανση δοντιών

fläsh Take Home Whitening System 10 % CP (≈ 3,5 % HP)

Κιτ για 1 ασθενή: 4 x Γέλη, 10 % CP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x Θήκη νάρθηκα, (προαιρετικά: 2 x Φύλλο λεύκανσης / 1 x Blocker), αισθητική λεύκανση δοντιών

fläsh Take Home Whitening System 16 % CP (≈ 5,6 % HP)

Κιτ για 1 ασθενή: 4 x Γέλη, 16 % CP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x Θήκη νάρθηκα, (προαιρετικά: 2 x Φύλλο λεύκανσης / 1 x Blocker), αισθητική λεύκανση δοντιών

fläsh Whitening Pen

4 ml, 16 % CP (≈ 5,6 % HP), γεύση μέντας, αισθητική λεύκανση δοντιών

fläsh Whitening Toothpaste, με γεύση λάιμ - μέντας

75 ml, 30 % ξυλιτόλη, 17 % υδροξυλαπατίτης

HP: υπεροξείδιο του υδρογόνου, CP: υπεροξείδιο του καρβαμιδίου

fläsh.

Επιλέξτε τα προϊόντα μας για μια ανώτερη εμπειρία λεύκανσης και περιποίησης, βελτιώνοντας τα χαμόγελα των ασθενών σας και ενισχύοντας τη φήμη περί αριστείας του ιατρού σας.



Βρείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

WHITEsmile GmbH
Weinheimer Straße 6
69488 Birkenau, Γερμανία
+49 (0)6201 8432190
info@flaesh.com

flaesh.com

Όλα τα προϊόντα λεύκανσης προορίζονται για επαγγελματικές εφαρμογές και εφαρμόζονται ή διανέμονται μόνο από οδοντιατρεία. Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων στο κείμενο. Η επιλογή των προϊόντων μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.
REF 909A4, 03/2025, GREEK