

Made in Germany

fläsh.

Tannbleking
som tannleger stoler på,
og som pasienter elsker.

flaeshapp.com



fläsh.

Tannbleking



Forvandle pasienter til tilhengere av klinikken din!

Tannbleking kan være sentralt for det perfekte smilet som pasienter ønsker seg – for å gjøre smilet flottere eller for å bidra med kronen på verket på deres restaurerende eller kjeveortopediske behandlinger.

fläsh er det profesjonelle tannblekingsystemet som leverer pålitelige resultater, er enkel å bruke for hele tannlege teamet, gjør arbeidsflyten enklere og sikrer at den enkelte pasienten får en trygg og behagelig behandling.

Med fläsh kan tannlegepraksiser slutte å bekymre seg for resultater og fokusere på å skape livsforvandlerende, trygge smil for pasientene deres.

Med fläsh er du ekspert som leverer flottere smil som pasienter elsker – fordi deres suksess er vår misjon.

Lykkelige pasienter hver gang

Pålitelige resultater som styrker pasientens tillit og lojalitet.

Enkelt for det kliniske teamet

Brukervennlig system designet for å gjøre arbeidsflyten enklere.

30 års erfaring

Pålitelig tysk innovasjon sikrer sikkerhet og konsistens.

fläsh.

Whitening Lamp



+



Perfekt synergi – hemmeligheten til eksepsjonelle blekeresultater!


Hemmeligheten til eksepsjonelle resultater, ligger i den perfekte kombinasjonen av fläsh Whitening Lamp og fläsh Light Whitening Gel.

Den nyeste høy-ytelses LED-teknologien med fokusert lysspektrum med høy intensitet, med synlig blått lys. Ergonomisk i bruk på grunn av det Easy Lock-systemet gir mulighet for perfekt plassering foran pasienten. Unike innstillinger for sensitive tenner og bleking av enkelttenner. Lyseffekt kan varieres. Optimale resultater med fläsh Chairside Light Whitening Gel. Trygg driftstemperatur.


fläshcard
tidsstyringssystem




Virtuelle instruksjoner direkte på enheten

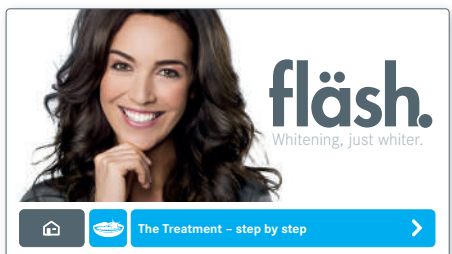

Tre blekeprogrammer
Konstant / Puls / Enkel

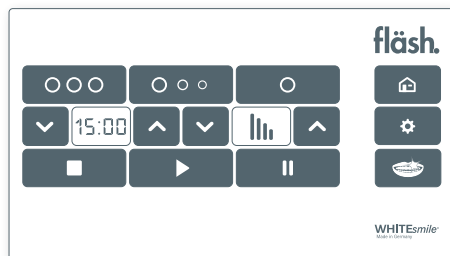

Bestemmelse av blekenyanser som er oppnådd

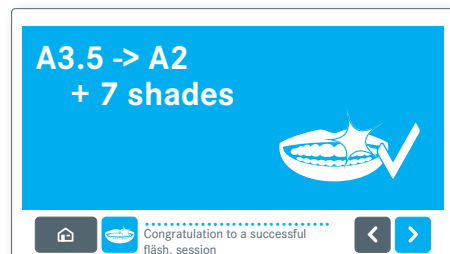

Avansert teknologi

Tre høy-ytelses LED.
Blått lysspektrum med høy intensitet
(460 nm, 190 mW/cm²)

Lang levetid

LED varer i mer enn
10 000 applikasjoner

Ergonomisk design

Easy Lock-system for presis pasientposisjonering

Spesiallagede innstillinger

Moduser for sensitive tenner og bleking av enkelttenner

Variabel lyseffekt

Kan tilpasses for optimale resultater

Trygg temperatur

Sikrer pasientkomfort

Optimal kombinasjon


Beste resultater med fläsh Chairside Light Whitening Gel

Systemet inkluderer

Whitening Lamp, tre vernebriller, fläshcard-system for gel, fullfarge berøringsskjerm

fläsh.

Chairside Light
Whitening System

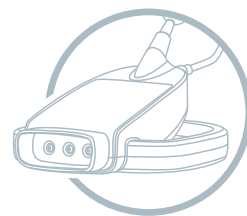


Skånsom, effektiv og rask

fläsh Chairside Light Whitening med aktivt klorofyll er skånsomt for tennene med lav sensitivitetsrate. Effektiv bleking med 3-4 behandlinger på 15 minutter hver i én økt.

Kosmetisk tannbleking med 6 % hydrogenperoksid. Medisinsk tannbleking med 32 % hydrogenperoksid og med bare medisinsk indikasjon.

Behandlingen kan intensiveres med påfølgende bruk av fläsh Take Home Whitening.

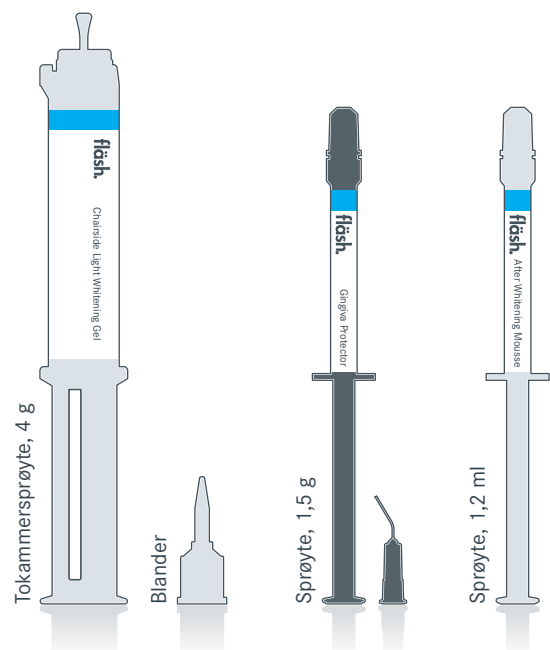

fläsh
lepperetraktor



Video: Behandling
trinn for trinn

Innhold i 2-pasientsett*:

- 2 x Chairside Whitening Gel, 4 g
- 2 x Gingiva Protector, 1,5 g
- 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml
- 2 x lepperetraktor
- 1 x 120 minutters tidskort

Effektiv bleking

Oppnår resultater med 3-4 økter på 15 minutter hver

Optimert for fläsh Whitening Lamp

Leverer de hviteste resultatene

Presis påføring

Grønn gel sikrer nøyaktighet

Egnet for voksne

For pasienter fra og med 18 år

Tilgjengelige konsentrasjoner

Medisinsk tannbleking 32 % HP
kosmetisk tannbleking 6 % HP

* Innholdet i pakkene kan variere fra land til land.

W02CSA, fläsh.com/video_step_by_step_eng


fläsh.

Take Home
Whitening System



Med laboratorieproduserte, spesiellagede skåler

Bruk som frittstående behandling eller oppfølging. Til bruk i blekeskåler. Konkluderer bleketilbudet i klinikken. Skånsom bleking med peppermynthesmak.

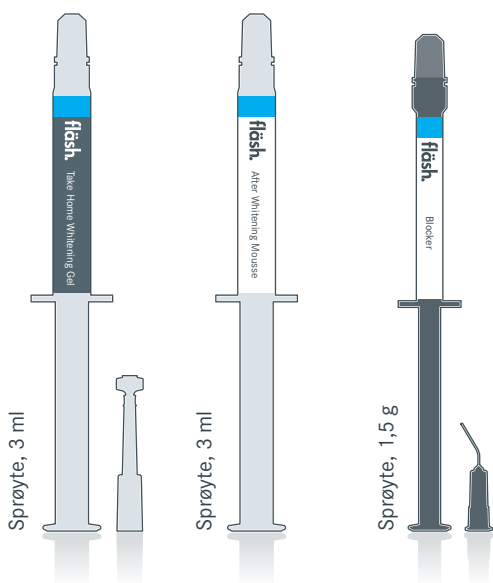

Innhold i 1-pasientsett*:

4 x Whitening Gel, 3 ml
1 x After Whitening Mousse, 3 ml
2 x blekefolie*
1 x Blocker*
1 x skålboks

Blocker (valgfritt)

Som avstandsstykke for laboriemodeller

Skålboks

Holder de spesiellagede skålene trygge og rene

Effektiv gel

Fås i 3 ml-sprøyter for enkel bruk

Egnet for voksne

For pasienter fra og med 18 år

After Whitening Mousse

Desensibiliserer tenner og øker hardhetsgraden

Kosmetisk tannbleking

10 % CP (≈3,5 % HP)

16 % CP (≈5,6 % HP)

* Innholdet i pakkene kan variere fra land til land.

Blekefolie (valgfritt)

For en perfekt tilpasning av laborieproduserte og spesiellagede skåler

HP: hydrogenperoksid, CP: karbamidperoksid

fläsh.

Etterbehandling

Den beste etterbehandlingen av bleking for pasientene dine

Den ideelle pleien for hvite tenner før og etter bleking. Beregnet på daglig bruk. Selv for sensitive tenner. Styrker emaljen med 17 % hydroksylapatitt. Fordobler beskyttelse mot karies med natriumfluorid (1100 ppm F) og 30 % xylitol. Støtter spyttavsondring, som igjen styrker hardhetsgraden.

Ingen SLS. Ingen triklosan. Ingen blekemidler. Skånsomme rengjøringsmidler. Nytt: Ingen titandioksid. Beskytter mot nydannelse av tannstein.



Forfriskende
LIME-PEPPERMYNTE

Whitening
Toothpaste
Care & Repair



flaeshapp.com

Tips: Bruk flaesh-app for å vise resultatet av blekingen!



Smidig integrering i klinikken din

Bleking av tenner er en viktig del av moderne estetisk tannbehandling. Vurder disse viktige trinnene for å lykkes med å integrere den i praksisen din:

Styrk teamet ditt

Fläsh Whitening Lamp har en veiledet behandlingsmodus, som gjør prosedyren enkel å følge. En trinnvis instruksjonsvideo fås også på flaesh.com. Det har stor makt å lede ved et godt eksempel. Når teammedlemmene dine opplever bleking selv, blir de entusiastiske talsfolk for tjenesten på klinikken din.

Øk bevisstheten blant pasienter

De fleste pasienter besøker ikke en klinikk spesifikt for tannbleking – men de vil gjerne ha et flottere smil! Teamet ditt kan enkelt innføre bleking som en supplerende behandling. Trekk frem denne muligheten under konsultasjoner og i informasjonsmaterialet til pasienter, som vist på neste side.

Forbedre effekten av arbeidet deres

Når du viser frem implantater, kjeveortopedisk behandlinger eller restaureringer som ser naturlig ut, er det enda mer overbevisende når det kombineres med et strålende, hvitt smil. Bruk før-og-etter-bilder for å demonstrere forvandlingen – både i praksisen din og på sosiale medier.

Gjør lykkelige pasienter til lojale talspersoner

Et trygt, hvitere smil sprer glede. Tilfredse pasienter deler sine opplevelser med andre og får inn nye klienter gjennom muntlige anbefalinger. Gjør tannbleking til en viktig del av å lykkes med klinikken!

Veien til et perfekt smil

Tannblekingsbehandlinger gir pasientene dine bedre smil. De gir også en ekstra verdi for tannbehandlinger eller kan gjenopprette patologisk misfargede tenner til sin naturlige tilstand. Med pasientinformasjonsheftet fra fläsh kan du enkelt forklare mulighetene for et hvitere smil til de enkelte pasientene dine.

Fås digitalt på www.fläsh.com og på flaeshapp.com

Utdrag fra pasientbrosjyren.

Perfekt i kombinasjon med behandlingen din

Tannbleking før tannrestaurering



For fyllinger, innlegg, kroner og implantater, blek de andre tennene på forhånd. Protoser kan ikke farge-avstemmes senere.

Tannbleking etter kjeveortopedisk behandling (reguleringsskinne)



Kjeveortopedisk behandling for voksne sikrer riktig tannjustering. Fläsh tannbleking gir smilet ditt den perfekte finpussen til slutt.

Bleking av enkelttenner



Også egnet for bleking og justering av enkelttenner.



Oppfriskningsbehandling kan foretas når som helst.

fläsh.

Er du klar for det flotteste smilet ditt?

Profesjonell tannbleking her på tannlegekontoret ditt.

flaesh.com



Pasientbrosjyre på venterommet ditt

fläsh.

Markedsføring



Skann for
å starte!

flaeshapp.com

Vis pasientene dine og informer dem

Umiddelbar KI-drevet forhåndsvisning
av blekeresultater som kan oppnås.

Kan brukes av klinikkens team og pasienter.
Ingen installasjon av noen app.

Du åpner bare **www.flaeshapp.com** i nettleseren
din. Bruk deretter kameraet på enheten din.

Tips: Last ned **flaeshapp.com** på startskjermen på telefonen
din for rask tilgang og for å vise pasientene dine det beste smilet
deres. Etter å ha tatt et bilde, roterer du telefonen horisontalt for
en sammenligning av bilder før og etter.



Det er viktig med markedsføring overfor pasienter

Tannbleking er en kraftig måte å tiltrekke deg nye pasienter på,
supplere andre behandlinger og utvide praksisen din.



Moderne kunstpreget
veggplate av akryl, 60 x 60 cm



Profesjonelt veggplate av akryl,
60 x 60 cm



Et akrylstativ av høy kvalitet,
21 x 15 cm, med omskiftende
motiver til skranken din eller
venterommet ditt.

Føl deg fri til å spørre om ytterligere hjelp til markedsføring.

fläsh Whitening Lamp

1 x Whitening Lamp / 3 vernebriller / 1 reklameplate av akryl, 60 x 60 cm

fläsh Chairside Light Whitening System 32 % HP

2-pasientsett: 2 x Gel, 32 % HP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g, 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x lepperetraktor + 120 minutters tidskort

32 % HP: medisinsk tannbleking kun ved medisinsk indikasjon

fläsh Chairside Light Whitening System 6 % HP

2-pasientsett: 2 x Gel, 6 % HP, 4 g / 2 x Gingiva Protector, 1,5 g, 2 x After Whitening Mousse, 1,2 ml, 2 x lepperetraktor + 120 minutters tidskort

6 % HP: kosmetisk tannbleking

fläsh Take Home Whitening System 10 % CP (≈3,5 % HP)

1-pasientsett: 4 x Gel, 10 % CP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x skålboks, (valgfritt: 2 x blekefolie / 1 x Blocker), kosmetisk tannbleking

fläsh Take Home Whitening System 16 % CP (≈5,6 % HP)

1-pasientsett: 4 x Gel, 16 % CP, 3 ml, 1 x After Whitening Mousse, 3 ml / 1 x skålboks, (valgfritt: 2 x blekefolie / 1 x Blocker), kosmetisk tannbleking

fläsh Whitening Pen

4 ml, 16 % CP (≈5,6 % HP), peppermyntesmak, kosmetisk tannbleking

fläsh Whitening Toothpaste, lime-peppermynte

75 ml, 30 % xylitol, 17 % hydroksylapatitt

HP: hydrogenperoksid, CP: karbamidperoksid

Made in Germany

fläsh.

Velg produktene våre for en overlegen bleking og pleie, og gi pasientene et flottere smil som underbygger klinikkens renommé for kompetanse.



Finn din lokale forhandler.

WHITEsmile GmbH
Weinheimer Straße 6
69488 Birkenau/Tyskland
+49 (0)6201 8432 190
info@flaesh.com

flaesh.com

Alle blekeprodukter er beregnet på profesjonell bruk og påføres eller utleveres kun av tannlegepraksis. Det tas forbehold om tekniske endringer og feil i teksten. Utvalget av produkter kan variere i forskjellige land. Spør din lokale forhandler.
REF 924A4, 03/2025, NORWEGIAN